

  
**CASADA**  
health & care



relax my way

Наръчник на потребителя



**Body Shape**  
Limited Edition





CASADA<sup>TM</sup>  
healthcare

since  
2000

time to *relax*

WITH CASADA

Откакто е създадено през 2000 г, името CASADA е гаранция за висококачествени продукти на СПА и ФИТНЕС пазара. Днес, продуктите на CASADA се предлагат в 37 страни по целия свят.

Непрекъснатото развитие, уникалният дизайн и целенасочената ориентация към по-здравословен начин на живот, са нещата, които характеризират продуктите на CASADA, както и ненадминатото и надеждно качество.

[www.casada.com](http://www.casada.com)

# Поздравления!

---

Уважаеми клиенти,

С покупката на тази масажна постелка, Вие показахте загриженост за Вашето здраве. За да можете да се насладите на предимствата ѝ в дългосрочен план, бихме искали да прочетете и да се придържате внимателно към инструкциите в това ръководство.

Пожелаваме Ви незабравими и приятни моменти с Вашият **Body Shape Limited Edition!**

## Съдържание

---

Масажът	5
Инструкции за безопасност	6
Обхват на доставката	6
Технически данни	7
Монтиране / Стартиране	7
Управляване	8
Масажни техники	8
Дистанционно управление	9
Отстраняване на неизправности	10
Съхранение / Грижи	10
Декларация за съответствие	10
Гаранционни условия	11

# Масажът



Всички ние сме запознати с облекчаващата релаксация, която доставя един масаж. Има очевидни обяснения за тези процеси в мускулите, кръвоносните съдове и нервните влакна.

Има две системи в организма:

Кръвният поток, който започва от сърцето, доставя хранителните вещества към мозъка, органите и мускулната система, докато лимфната система гарантира, че организмът се пречиства от метаболитните продукти, шлаката и токсините.

Ако имунната система е атакувана от инфекции и вируси, първото нещо, което лекарят прави, е да пипне лимфните възли, тъй като те произвеждат защитни клетки и реагират на това напрежение като се подуват.

Всеки масаж стимулира тази система, като кара телесните течности да се движат и по този начин насърчава прочистването на вредните вещества и доставката на кислород и хранителни вещества.

# Инструкции за безопасност



Преди да използвате масажния уред, моля прочетете внимателно инструкциите, за да осигурите безпроблемното му функциониране и оптимален ефект. Моля, пазете това ръководство!!!

- Масажният уред е в съответствие с всички европейски стандарти и действащи разпоредби за сигурност.
- Вашият масажен уред има гаранционен срок, описан на издадената Ви при закупуването гаранционна карта. Всеки необходим ремонт може да бъде извършен само от оторизиран сервиз. Неправилното използване, както и неоторизирани ремонти са забранени, поради съображения за сигурност - това ще доведе до анулиране на гаранцията.
- Избягвайте да докосвате щепсела с мокри ръце.
- Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина. Не позволявайте уреда да влиза в контакт с вода и високи температури.
- В случай на дълъг период на неизползване, изключете уреда от ел. мрежа, с цел да се предотврати късо съединение.
- Не използвайте повредени щепсели, кабели или разхлабени гнезда. Ако щепселът или кабелите се повредят, те трябва да бъдат заменени от оторизирания сервиз. В случай на неизправност, незабавно прекратете връзката с електрозахранването. Злоупотреба или неправилно използване анулират гаранцията на Вашия уред.
- За да се предотврати прекомерен стрес на мускулите и нервите, не превишавайте максималното време за масаж от 30 минути.
- Не използвайте остри предмети, за да не повредите уреда.
- Моля, използвайте само подходящи за този уред източници на захранване.
- Моля, след използване и преди почистване изключвайте щепсела, за да предотвратите повреди на уреда или наранявания.
- Не използвайте уреда, докато шофирате.
- Използвайте уреда само по начина, описан в упътването за употреба.
- Не използвайте уреда с части или допълнения, които не са предвидени за него.
- Не използвайте уреда, ако корпусът му е повреден или дефектен.
- Избягвайте проникване на чужди тела във вътрешността на уреда.
- Не използвайте остри или режещи предмети.
- Не третирайте с препарати и силни химикали масажния уред.
- Масажът не е препоръчителен при бременност (в областта на торса), или наличие на някои от следните заболявания: тромбоза, прекаран скорошен инсулт, следоперативен период или рак. В тези случаи, се консултирайте с Вашия лекар преди да използвате уреда.
- Ако имате поставен пейсмейкър, задължително се консултирайте с Вашия лекар преди употреба.

## Обхват на доставка

- Захранващ блок 24 волта / 12 волта
- Наръчник
- Масажиращ матрак

# Технически данни

---

**Размери:** 176 x 61 см


**Тегло:** 2,1 кг

**Източник на енергия:** вход: AC 100-240V, 50~60Hz, 800 mA / изход: DC 12V, 2500 mA

**Номинална енергия:** макс. 30 вата

**Автоматично време на работа:** 10 минути

**Сертификати:**

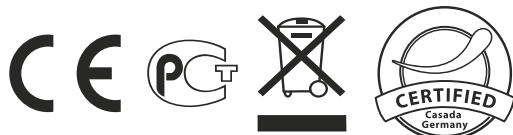

## Монтиране / Стартиране

---

- Отворете картоната, извадете главния адаптер и го оставете в близост.
- Свържете адаптера с масажния матрак, след което свържете и с контакта.
- За да включите масажния матрак, натиснете бутон ON/OFF на дистанционното. LED лампичката светва в червено, и устройството се включва автоматично на MI в средна интензивност.

# Управляване

## АВТОМАТИЧНА ПРОГРАМА

Всяка програма (M1 – M5) върви в продължение на 10 минути и е избрана чрез бутон „Mode“. По време на автоматичната програма може да избирате между 3 етапа всеки път и превключвайте загряването от on и off. След приключване на избраната програма, устройството се изключва автоматично.

## НАРЪЧНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чрез дистанционното можете също и да изберете само едно от петте различни вибрационни нива. По този начин, изборът на интензивност и топлина е възможен по всяко време. След препоръчаното време за работа от 30 минути, устройството се изключва самостоятелно.

# Масажни техники



### ВИБРАЦИЯ

Вибрациите се изпращат до отделните части на тялото равномерно, и проникват дълбоко в мускулите. Това стимулира циркулацията в мускулите.



### ЗАГРЯВАНЕ

Дълбоко проникващ затоплящ ефект, с който Вие релаксирате идеално. Тази функция предимно спомага за отпускане на напрежението в мускулите.



### АВТОМАТИЧНО

Специално развити автоматични програми за цялото тяло, които предлагат богат диапазон от различни масажни техники. В допълнение, можете да включите и затопляща функция, ако желаете.



### АДАПТОР ЗА КОЛА

Адапторът за кола прави устройството преносимо.

Масажната постелка идва с 10 интелигентно вградени вибрационни нива, разделени на 5 зони, както и 4 загряващи нива, които са разпределени по две на всяка зона.





# Дистанционно управление

## МАСАЖНИ ЗОНИ

<b>NECK</b>	2 вибрационни нива за масаж на врата
<b>UPPER BACK</b>	2 вибрационни нива за масаж на горната част на гърба
<b>LOWER BACK</b>	2 вибрационни нива за масаж на долната част на гърба
<b>LEG</b>	2 вибрационни нива за масаж на краката
<b>FEET</b>	2 вибрационни нива за масаж на ходилата

## АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ

<b>M1</b>	Вибрационно ниво, масажиращо в ритъм надолу и нагоре
<b>M2</b>	Дълги вибрационни интервали -> Горна част на гръб – Долна част на гръб – Крак – Ходило – Врат
<b>M3</b>	Къси интервали на индивидуални и комбинирани вибр. нива Врат и горна част на гърба – Крак & Ходило – Долна част на гърба, след което всички нива заедно в бърз ритъм.
<b>M4</b>	Бързи, къси вибр. интервали, както следва: Горна част на гърба & Долна част на гърба – Врат & Ходило
<b>M5</b>	Вибр. нива, масажиращи в ритъм нагоре и надолу в стил вълни.

## ФУНКЦИИ

<b>ON/OFF</b>	С този бутон можете да превключите масажния матрак на включено или изключено
<b>HEAT</b>	Включване и изключване на загряващата функция
<b>INTENSITY</b>	Регулираема интензивност в 3 нива
<b>MODE</b>	Избор на определена масажна програма



## Отстраняване на неизправности

### Възможен проблем:

Устройството или дистанционното не работят, въпреки че са включени в захранване.

### Решение:

Проверете дали адаптора е хубаво свързан. Устройството може да е прегряло след дълго използване. В такъв случай, изключете от захранването и го оставете да се охлади бавно.

## Инструкции за грижа / Съхранение

Внимателната грижа ще увеличи живота на вашата **Body Shape Limited Edition**.

1. Препоръчително място за съхранение: сухо, непрашно място.
2. Дръжте течности и огън на разстояние от **Body Shape Limited Edition**.
3. Почиствайте като използвате сухи и меки парцали.
4. Винаги изключвайте **Body Shape Limited Edition**, когато не го използвате.

## Декларация за съответствие

Отговаря на Европейските стандарти EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.